

作業完了報告書SYSTEM

実装済み機能のご報告

ご提示いただいた概要書にもとづき開発を進めております。本書は、現時点で実際に動作している機能を画面とともにご報告するものです。掲載の画面はすべて稼働中のシステムから取得した実際のものです。

対象 作業完了報告書SYSTEM 報告日 2026年9月3日 状況 概要書記載の全画面が動作

34 実装済み画面・機能	10,000 交換部品マスタ 登録件数
1.2ms 部品検索の応答時間	2 帳票様式(客先用・社内用)

01 概要

概要書に記載された画面は、すべて動作しています

協力会社の現場担当者がタブレットで使う「ユーザーサイト」、事務局が使う「管理者サイト」の双方を構築し、報告書の作成から提出、社内用報告書の作成、完了までの一連の流れが通して動作する状態です。

区分	内容	状況
ログイン・アカウント	協力会社ごとのログイン、パスワード発行・ロック解除	動作
報告書の作成	基本情報／作業内容／交換部品／測定値・報告事項／確認・署名	動作
手書きサイン	指・スタイラスペンでの署名入力	動作
帳票の出力	PDF作成・画面プレビュー・印刷	動作
メール送信	PDFを添付して任意の宛先へ送信、送信履歴の記録	配信設定待ち
報告書一覧	絞り込み、複製して作成、状態の表示	動作
社内用報告書	残作業／再手配部材／移動作業時間／営業アプローチ／備考	動作
マイページ	ユーザー情報・作業者テーブル・報告事項テーブルの変更	動作
管理者サイト	報告書の横断確認、ユーザー登録、各種マスタ管理	動作
通信環境への対応	圏外での入力継続と復帰後の自動送信	次フェーズ

以降、主要な機能について実際の画面をご覧ください。すべての画面ではなく、ご確認いただきたい要点に絞って掲載しております。

タブレットでの入力（幅768px）

ご指定のとおり幅768pxで設計し、指で操作する前提でボタンを大きく取っています。画面上部には概要書と同じ手順表示([1 基本情報]…[5 確認・署名])を置き、いま何を入力しているかが常に分かるようにしました。

作業完了報告書SYSTEM

ユーザーログイン

ユーザーID

パスワード

☐ ユーザーID、パスワードを保持する

ログイン

パスワードを3回間違えた場合は15分間ロックされます。お急ぎの場合は事務局にて即時解除いたします。

デモ用アカウント： ABC000 / demopass

ログイン 概要書 1-1
協力会社ごとのIDでログインします。

作業完了報告書SYSTEM

● サーブ保存済み

株式会社アルファ設備（ID: ABC000）

▼ 報告書

作成（新規で作成）

一覧表（コピーして作成、修正、プレビュー）

▼ マイページ

ユーザー情報の変更

作業者テーブルの変更

報告事項テーブルの変更

ログアウト

ダッシュボード 概要書 1-2
報告書の作成・一覧と、マイページへの入口です。

ご提案

パスワードのロックは15分で自動解除する方式としました。概要書では「3回エラーでロック、解除は事務局」となっておりますが、IDが会社単位のため、お一人の打ち間違いで現場全員がログインできなくなります。休日・夜間の作業を考慮し、15分で自動的に解除される方式に加え、管理画面からの即時解除もご用意しています。

交換部品 1万件からの選択

実際に1万件を登録した状態で動作しています。検索と50音での絞り込みに対応し、応答は1000分の1秒台です。件数が増えても速度は落ちません。

[1 基本情報] [2 作業内容] [3 交換部品] [4 測定値・報告事項] [5 確認・署名]

フィルター

クリア

全 あ か さ た な は ま や ら わ

選択中の部品

4 品目

プレフィルター 610×610×290 MIU-201用 A01-001

-

9

+

枚

削除

水フィルター 500×500×150 保冷庫用 E05-003

-

5

+

本

削除

風速切替基板 610×305×290 MDF用 L12-002

-

3

+

枚

削除

ファン 610×610×290 RX用 N14-001

-

2

+

個

削除

プレフィルター 610×610×290 MIU-201用

A01-001 ぶれふいるたー

枚

✓

中性能フィルター 610×610×290 MIU-401用

B02-001 ちゅうせいのうふいるたー

枚

+

HEPAフィルター 610×610×290 MDF用

C03-001 へばふいるたー

枚

+

ULPAフィルター 610×610×290 RX用

D04-001 うるばふいるたー

枚

+

水フィルター 610×610×290 LI-11用

E05-001 みずふいるたー

本

+

60 / 1,200 件

自由記述

◀
もどる▶
つぎへ

交換部品の登録 概要書 2-3

「フィルター」で検索し1,200件に絞り込んだ状態。選択済みの4品目は画面上部に固定表示されます。

ご確認のお願い

50音での並べ替えには、部品マスタへの「読み仮名」列の追加が必要です。漢字表記からは読みを機械的に判定できないためです。現在はデモ用の読みを登録して動作させております。1万件への読み付与について、ご相談させてください。

工夫した点

検索して絞り込むと、すでに数量を入力した品目が画面から消えてしまいます。これを避けるため、**選択済みの部品は検索結果とは別に、常に画面上部へ固定表示する構成**としました。

測定値の入力と、作業完了の確認

作業完了報告書SYSTEM

● サーバ保存済み

[1 基本情報] [2 作業内容] [3 交換部品] [4 測定値・報告事項] [5 確認・署名]

部屋名	型式	積算時間	製造No.	製造年月	
無菌病室A	無菌病室	12480	A20481	2019年4月	×
無菌病室B	無菌病室	11930	A20482	2019年4月	×
処置室	無菌病室	8260	B10774	2021年9月	×

+ 行を追加

積算時間は0～100,000h／製造No.は6文字以内

報告事項

選択

水フィルター等、消耗部品は交換いたしました。
BCR3シャワーパンのゆるみ、BCR5、入口扉の動きは修正し動作良好です。その他、特に問題ありません。
室内清浄度はFDS209Dにてクラス100、および150にてクラス5をクリアーし良好です。

もどる

つぎへ

測定値・報告事項 概要書 2-4

行は自由に追加・削除できます。報告事項は登録済みの定型文から選んで挿入できます。

作業完了報告書SYSTEM

● サーバ保存済み

[1 基本情報] [2 作業内容] [3 交換部品] [4 測定値・報告事項] [5 確認・署名]

サイン入力

下記の注意事項の確認がとれたらチェックをいれてください

☒ 予定の作業はすべて終了しました

☒ 作業前の状態に復旧したことを確認しました

☒ 作業により発生した廃材はすべて持ち帰りました

☒ 設備の運転状態が正常であることを確認しました

☒ 次回点検の予定について申し送りをしました

作業者 *

鈴木太郎

もどる

つぎへ

確認・署名 概要書 2-5・2-6

5つの確認事項すべてにチェックが入るまで、作業者欄と「つぎへ」は操作できません。

- 測定値の行数を可変にしました。画面例では5行でしたが、部屋数が5を超える現場に対応するためです。
- 手書きサインは実際に動作します。指・スタイラスペンの両方に対応し、署名中に画面がスクロールしないようにしています。上の画面に表示されている署名は、実際に入力したものです。
- 確認事項の文言は管理画面から変更できます。概要書では3～5の文言が未定でしたので、後から変更できる方式にしております。

ご提案

入力内容は画面ごとに保存しています。概要書では最後の「つぎへ」で全体を登録する記載でしたが、その方式では作業の途中で通信が切れた際に、それまでの入力がすべて失われます。各画面で保存し、最終画面では提出済への切り替えのみを行う構成としました。

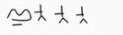
報告書PDFの出力

入力された内容から、下記のPDFを作成します。画面でのプレビュー、印刷、メール添付に対応しています。

作業完了報告書

〇〇市立総合病院 御中 2026年9月3日

株式会社〇〇テック
東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇ビル5F
TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001

作業日	2026年9月1日(火)～2026年9月2日(水)			
作業場所	4階 中央無菌室			
作業者	鈴木太郎、加藤次郎			
作業件名	無菌病室(MIU-201)×3台 保守点検作業			
作業内容	交換部品名／数量			
・無菌病室 MIU-201×3台 ・無菌病室 MIU-401×2台 以上、保守点検作業一式	プレフィルター 610×610×290 MIU-201用	9枚		
	水フィルター 500×500×150 保冷庫用	5本		
	風速切替基板 610×305×290 MDF用	3枚		
	ファン 610×610×290 RX用	2個		
測定値				
部屋名	型式	積算時間	製造No.	製造年月
無菌病室A	無菌病室 MIU-201	12.480h	A20481	2019/04
無菌病室B	無菌病室 MIU-201	11.930h	A20482	2019/04
処置室	無菌病室 MIU-401	8.260h	B10774	2021/09
報告事項				
水フィルター等、消耗部品は交換いたしました。 BCR3シャワーパンのゆるみ、BCR5、入口扉の動きは修正し動作良好です。その他、特に問題ありません。 室内清浄度はFDS209Dにてクラス100、および150にてクラス5をクリアし良好です。				
上記の内容を検収致します。				
サイン			担当	鈴木太郎

作業完了報告書

〇〇市立総合病院 御中 2026年9月3日

株式会社〇〇テック
東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇ビル5F
TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001

作業日	2026年9月1日(火)～2026年9月2日(水)	
作業場所	4階 中央無菌室	
作業者	鈴木太郎、加藤次郎	
作業件名	無菌病室(MIU-201)×3台 保守点検作業	
今回作業時の残作業	再手配の必要な部材／数量	
3階west側の風速調整は、部材入荷待ちのため次回作業時に実施予定。	1 プレフィルター 610×610×290 MIU-201用	1枚
	2 水フィルター 500×500×150 保冷庫用	2本
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
移動及び作業時間の推移		客先への営業アプローチ
2026年9月1日(火) I 往 08:10～09:40 S 作業 09:50～17:30 I 復 17:45～19:10 2026年9月2日(水) I 往 08:00～09:20 S 作業 09:30～22:00 I 復 22:15～01:30 合計 移動7時間30分 作業20時間10分		来期の更新工事について施設課ご担当より打診あり。9月中に見積提示予定。
備考(社内への報告事項等)		
入館証の受取は警備室にて。次回も同様の手順で対応のこと。		

客先提出用 報告書 概要書 2-8

入力内容がそのまま反映されます。手書きサインも記載されます。

社内用報告書 概要書 4-7

残作業・再手配部材・移動作業時間・営業アプローチ・備考を出力します。

重要なお相談

帳票はExcelを変換するのではなく、同じ体裁をシステム側で組み直して出力しています。ご指定のさくらインターネット「ビジネス」では、ExcelをPDFへ変換する仕組みを動かすことができないためです。現在の出力は上図のとおりですが、お手元の様式と細部で異なる箇所がございましたら、ご指摘いただければ調整いたします。正式なExcelテンプレートをご提供いただけますと、より正確に合わせ込めます。

報告書の一覧と社内用報告書

作業完了報告書SYSTEM

●サーバ保存済み

ダッシュボード

病院名・作業件名で絞り込み

検索

No.	作業日／作成日	病院名	作業者	署名	PDF	Mail	社内用	状態	
1001	26/09/01 26/09/03	〇〇市立総合病院	鈴木太郎	有	●	0	●	提出済	複製
1000	26/08/21 26/08/21	△△病院 東病棟	山田健一	有	●	0	●	完	複製
999	26/08/15 26/08/15	市立中央病院	大谷翔	有	●	0	●	完	複製
998	26/08/01 26/08/01	□□記念病院	木村拓	有	●	0	●	社内用済	複製

「複製」は同じ病院・設備の再点検を想定した機能です。署名・PDF・メール履歴は引き継ぎません。

報告書一覧 概要書 3

署名・PDF・メール回数・社内用・状態を一覧で確認できます。

- 一覧に絞り込みと「複製」を追加しました。件数が増えたときに目的の報告書へたどり着けるようにするためです。複製は同じ病院での再点検を想定した機能で、署名・PDF・メール履歴は引き継ぎません。
- 移動・作業時間に日付を持たせました。複数日にわたる作業や、22時から翌1時までのように日付をまたぐ作業を記録できるようにするためです。上図では2日分を入力し、移動7時間30分・作業20時間10分が自動計算されています。
- 状態を4区分にしました。下書き／提出済／社内用作成済／完了(請求済)です。概要書の「完／－」の2区分では、業務の流れの途中経過を表せないためです。

07 管理者

管理者サイト（幅1600px）

事務局のパソコンからご利用いただく画面です。全協力会社の報告書を横断して確認できます。

作業完了報告書SYSTEM

●サーバ保存済み

【1 基本情報】【2 今回作業時の残作業】【3 再手配の必要な部材】【4 移動および作業時間の推移】【5 客先への営業アプローチ】

【6 備考(社内への報告事項等)】

移動時間・・・I 作業時間・・・S

09/01/2026

I 往

08:10 AM

～

09:40 AM

S 作業

09:50 AM

～

05:30 PM

I 復

05:45 PM

～

07:10 PM

09/02/2026

I 往

08:00 AM

～

09:20 AM

S 作業

09:30 AM

～

移動および作業時間 概要書 4-4

日付ごとに入力し、合計時間を自動計算します。

検索:

実行

1-4 / 4

No.	作業日	作成日	病院名	協力会社	作業者	署名	PDF	Mail	社内用	状態
1001	26/09/01	26/09/03	〇〇市立総合病院	株式会社アルファ設備	鈴木太郎、加藤次郎	有		0		提出済
1000	26/08/21	26/08/21	△△病院 東病棟	株式会社アルファ設備	山田健一	有		0		完了
999	26/08/15	26/08/15	市立中央病院	株式会社アルファ設備	大谷翔	有		0		完了
998	26/08/01	26/08/01	□□記念病院	株式会社アルファ設備	木村拓	有		0		社内用作成済

ダッシュボード 概要書 K-2

病院名・作業件名・会社名などで検索できます。PDF・社内用の各アイコンから帳票を表示します。

+ 追加

アカウントは協力会社ごとに発行します(概要書「その他、仕様」)。

1-1 / 1

アカウントID	会社名	作業者	報告書	登録日	状態	操作
ABC000	株式会社アルファ設備	鈴木太郎、加藤次郎、山本直人、神保進之介、小田健一 他2名	4	26/09/03		PW再発行 利用停止

パスワードは暗号化して保存しているため、管理者でも内容を確認することはできません。忘れた場合は「PW再発行」で新しいパスワードを発行してください。

ユーザー登録 概要書 K-3

アカウントの発行に加え、パスワード再発行・ロック解除・利用停止を行えます。

ダウンロード

インポート

有効な部品 10,000 件

1-100 / 10000

部品名・読み・コードで検索

検索

無効も表示

全

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

コード	部品名	読み	行	単位	優先順位	登録日
A01-001	プレフィルター 610×610×290 MIU-201用	ぶれふいるたー	は	枚	9999	26/09/03
B02-001	中性能フィルター 610×610×290 MIU-401用	ちゅうせいのうふいるたー	た	枚	9998	26/09/03
C03-001	HEPAフィルター 610×610×290 MDF用	へばふいるたー	は	枚	9997	26/09/03
D04-001	ULPAフィルター 610×610×290 RX用	うるばふいるたー	あ	枚	9996	26/09/03
E05-001	水フィルター 610×610×290 LI-11用	みずふいるたー	ま	本	9995	26/09/03
F06-001	活性炭フィルター 610×610×290 LI-30用	かつせいたんふいるたー	か	枚	9994	26/09/03
G07-001	配管キット 610×610×290 保冷庫用	はいかんきつと	は	式	9993	26/09/03
H08-001	送風機 610×610×290 保温庫用	そうふうき	さ	台	9992	26/09/03
I09-001	スイッチ 610×610×290 共通	すいっち	さ	個	9991	26/09/03
J10-001	ランプ 610×610×290 汎用	らんぷ	ら	個	9990	26/09/03
K11-001	リレー 610×610×290 MIU-201用	りれー	ら	個	9989	26/09/03
L12-001	風速切替基板 610×610×290 MIU-401用	ふうそくきりかえきばん	は	枚	9988	26/09/03
M13-001	制御基板 610×610×290 MDF用	せいぎょきばん	さ	枚	9987	26/09/03
N14-001	ファン 610×610×290 RX用	ふあん	は	個	9986	26/09/03
O15-001	パッキン 610×610×290 LI-11用	ぱっきん	は	個	9985	26/09/03
P16-001	Vベルト 610×610×290 LI-30用	ぶいべると	は	本	9984	26/09/03
Q17-001	モーター 610×610×290 保冷庫用	もーたー	ま	台	9983	26/09/03

交換部品マスタ 概要書 K-4

1万件を登録した状態。50音の絞り込みと検索に対応し、CSVでの入出力が可能です。

ご提案

アカウント登録画面に、初期パスワードの発行・ロック解除・利用停止を追加しました。概要書の登録画面にはパスワードの項目がなく、発行方法が定まっていなかったためです。パスワードは暗号化して保存しますので、管理者様でも後から内容を確認することはできません。お忘れの場合は再発行していただく運用になります。

ご提案

マスタの取込は「内容を確認してから確定する」方式に変更しました。概要書では「書き込む前にDBをクリア」となっておりますが、1万件の取込中に処理が中断すると、マスタが空のまま失われる恐れがあります。取込前に追加・更新・無効化の件数とエラー行をご確認いただき、そのうえで確定する手順としました。また、取込データに含まれない品目は削除せず「無効」として残すため、過去の報告書の記載内容が変わることはありません。

今後の予定とご相談事項

項目	内容	ご相談
通信環境への対応	圏外でも入力を継続し、電波の回復後に自動送信する仕組み	対応範囲のご確認(後述)
メールの配信設定	画面・添付・送信履歴は完成済み。実際の配信のみ未接続	送信元メールアドレスのご指定
帳票様式の確定	現在の出力を、お手元の様式に合わせ込みます	Excelテンプレートのご提供
部品マスタの読み仮名	50音での並べ替えに必要です	1万件への読み付与
確認事項の文言	確認事項3～5の文言が未定です	文言のご指定

最も重要なご相談

通信環境への対応をどこまで行うかによって、開発規模が大きく変わります。概要書では「開発時に詳細を検討」とされておりましたが、次の3段階のいずれをご希望かによって費用が大きく異なるため、着手前にお決めいただきたく存じます。

段階	できること	できないこと
段階1	画面を移動しても入力内容が消えない ※現在この段階まで実装済みです	通信が切れている間の新規入力・保存
段階2	圏外でも報告書の入力・保存を継続し、電波が戻ると自動送信。部品などのマスタも端末に保持	PDF作成・メール送信・過去分の閲覧は通信時のみ
段階3	過去の報告書の閲覧やPDFの作成まで、すべて端末内で完結	—

概要書の第8章の記載内容からは段階2が想定されていると読み取れます。段階2でよろしければ、次のフェーズとして着手いたします。

ご参考

なお、タブレットの仕様上、ホーム画面に追加せずご利用の場合、端末に保存したデータが数日で削除されることがあります。段階2以上をご希望の場合は、「ホーム画面に追加してご利用いただく」「点検当日中に送信していただく」という運用とあわせてのご提供となります。